



EK1136-AW1

Human Serpin E1/PAI-1 ELISA Kit

检测试剂盒（酶联免疫吸附法）

Catalog Number

EK1136 - 48

EK1136 - 96

定量检测血清、血浆和细胞培养上清中的人丝氨酸蛋白酶抑制剂 E1 (Serpine E1) 浓度。

本产品仅用于科学研究，非诊断试剂，不能用于临床诊断。

一、产品介绍

1. 背景介绍

Serpine E1, 又名纤溶酶原激活物抑制因子-1 (PAI-1), 是丝氨酸蛋白酶抑制剂超家族中的一员, 主要由内皮(血管内皮衬里细胞)产生, 但也由其他类型的组织如脂肪组织分泌产生。Serpine E1 是尿激酶和组织型纤溶酶原激活剂(uPA 和 tPA) 的主要抑制剂。PA-纤维蛋白溶酶系统参与多种生理和病理过程如纤维蛋白溶解、纤维化、血管生成、伤口愈合、肿瘤细胞的侵袭和转移。例如, 高水平的 uPA 和 Serpine E1 与乳腺癌患者的预后不良相关, 研究证实 uPA 和 Serpine E1 的临床价值处于 1 级水平, 是最可靠的生物标志物。除了乳腺癌, Serpine E1 也参与许多其它疾病如代谢综合征、哮喘、重度抑郁症(MDD)以及衰老相关疾病。血浆中 Serpine E1 的缺失将导致异常出血, 高水平的 Serpine E1 与遗传性易栓症相关。

2. 检测原理

本试剂盒采用双抗体夹心酶联免疫吸附检测技术。特异性抗人 Serpine E1 抗体预包被在高亲和力的酶标板上。酶标板孔中加入标准品、待测样本和生物素化的检测抗体, 经过孵育, 样本中存在的 Serpine E1 与固相抗体和检测抗体结合。洗涤去除未结合的物质后, 加入辣根过氧化物酶标记的链霉亲和素(Streptavidin-HRP)。洗涤后, 加入显色底物 TMB, 避光显色。颜色反应的深浅与样本中 Serpine E1 的浓度成正比。加入终止液终止反应, 在 450 nm 波长(参考波长 570 - 630 nm)测定吸光度值。

3. 试剂盒检测的局限

- 1) 请在本试剂盒标示的有效期内使用。
- 2) 试剂盒的试剂不能与其他批号的试剂或其他来源的试剂混合使用。
- 3) 任何标准品稀释、操作人员、移液技术、洗涤技术、孵育温度、试剂盒保存时间的改变, 都将影响结合反应。
- 4) 本试剂盒在设计上去除或降低了生物学样本中的一些内源性干扰因素, 并非所有可能的影响因素都已经去除。

二、基本信息

1. 试剂盒提供的材料

组分	编号	EK1136 - 48	EK1136 - 96
酶标板	EK1136P	48T	96T
标准品	EK1136S	1 vial	2 vials
检测抗体	EK1136D	1 vial	1 vial
链霉亲和素	E0290	1 vial	1 vial
10×检测缓冲液	E0310	10 ml	10 ml
显色底物	E0230	6 ml	11 ml
终止液	E0300	11 ml	11 ml
20×洗液	E0281	50 ml	50 ml
封板膜	E0200	6	6

2. 未提供的材料设备

- 1) 能够检测 450 nm 吸光度的酶标仪，参考波长 570 nm 或 630 nm
- 2) 移液器及枪头、加样槽
- 3) 准备试剂用的试管、离心管、量筒等
- 4) 蒸馏水或去离子水
- 5) 涡旋振荡器、微孔板振荡器

3. 贮存

试剂盒保存于 2 - 8℃，有效期标注于标签上。只有恰当保存的试剂才是有保证的。如果试剂盒的组分需要再次使用，请确保上一次使用之后没有被污染。

未开封试剂盒		贮存于 2 - 8℃。 请在有效期内使用。
打 开 的 试 剂 盒 或 重 组 试 剂	1×洗液 1×检测缓冲液 终止液 显色底物 检测抗体 链霉亲和素	在 2 - 8℃， 大约可以贮存 1 个月。
	标准品	在-20℃，大约可贮存 1 个月。 重溶使用 1 次后丢弃。
	酶标板	未使用的板条请放回铝箔袋，封好封口。在 2 - 8℃，大约可贮存 1 个月。

4. 注意事项

- 1) 所有的化学试剂理应被认为具有潜在危害。
- 2) 推荐只有经过良好实验室培训的工作人员方可操作本试剂盒。操作时请佩戴合适的防护设施，例如白大衣、乳胶手套、安全眼镜等。
- 3) 请避免试剂接触皮肤和眼睛。如不慎接触，请立即用大量清水清洗。
- 4) 试剂盒中的终止液为酸性溶液，在使用终止液时，请佩戴防护服，及防护眼睛、手及面部的设施。
- 5) 本试剂盒用于科学研究，不能用于诊断治疗。
- 6) 请不要使用其他批号或其他来源的试剂替代本试剂盒中的试剂。
- 7) 请不要使用过期的试剂。
- 8) 在试剂盒的贮存或孵育过程请避免强光照射。
- 9) 在操作试剂盒或处理样本的区域请不要饮食。
- 10) 不要让试剂或样本接触皮肤和粘膜。
- 11) 在操作试剂盒或处理样本时请佩戴乳胶或一次性手套。
- 12) 显色底物避免与氧化试剂和金属接触。
- 13) 避免气溶胶的产生。
- 14) 为了避免微生物的污染，以及试剂与样本间的交叉污染，请使用一次性枪头。
- 15) 使用干净的容器配制试剂。

- 16) 暴露于酸性环境会抑制结合。
- 17) 试剂的准备必须使用蒸馏水或去离子水。
- 18) 显色底物在使用之前必须平衡至室温 ($25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$)。
- 19) 样本可能含有传染性病原体，处理样本和可能的污染材料的首选方法是 121.5°C ，最少 1 小时。
- 20) 液体废弃物的处理。不含酸的液体废弃物，加入 1.0 % 的次氯酸钠，浸泡 30 分钟。含酸的液体废弃物，请先中和，再加入次氯酸钠。

5. 技术要点

- 1) 重溶或者混合蛋白的时候，始终避免气泡产生。
- 2) 避免交叉污染，在进行标准品加样、样本加样，以及不同试剂加样的时候，请更换枪头。不同的试剂，使用不同的加样槽。
- 3) 在应用自动洗板机时，加入洗液之后，设置 30 秒的浸泡程序，或者在不同的洗涤步骤将微孔板掉转 180 度，这样可以提高分析的准确度。
- 4) 为保证结果的精确性，孵育时封好封板膜。
- 5) 显色底物在添加之前应是无色的。保持显色底物始终处于避光态。
- 6) 终止液的添加顺序应与显色底物的添加顺序相同。
- 7) 添加终止液之后，底物的颜色应由蓝色转变为黄色。如果底物呈现绿色，说明终止液与显色底物没有充分混匀。
- 8) 推荐所有的检测样本和标准品在检测中设复孔。
- 9) 在任何情况下，避免接触微孔板的内表面。

三、 检测步骤

1. 样本采集与贮存

细胞培养上清

$300 \times g$ 离心 10 分钟去除沉淀物，即刻检测，或者分装， -20°C 以下贮存。

血清样本

离心管收集血清。血样凝集 30 分钟后， $1,000 \times g$ 离心 10 分钟。吸取血清样本之后即刻检测，或者分装， -20°C 以下贮存。

血浆样本

EDTA、枸橼酸钠或肝素抗凝收集血浆样本。 $1,000 \times g$ 离心 30 分钟收集样本。即刻检测，或者分装， -20°C 以下贮存。

本试剂盒可能适用于其它生物学样本。细胞培养上清、血清和血浆已经过验证。

注意：检测前，样本中可见的沉淀必须去除。不要使用严重溶血或高血脂的样本。样本应分装并贮存于 -20°C ，以避免人 Serpin E1 活性的丢失。如果在 24 小时内检测。样本可以存放在 $2 - 8^{\circ}\text{C}$ 。

避免样本的反复冻融。在检测前，冷冻样本应缓慢地恢复至室温 ($25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$)，轻柔地混匀。

2. 样本准备

正常血清血浆样本需要 20 倍稀释。推荐 $10 \mu\text{l}$ 样本 + $190 \mu\text{l}$ $1\times$ 检测缓冲液。

3. 试剂准备

检测前请将所有的试剂、样本恢复至室温 ($25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$)。

如果浓缩的试剂出现结晶， 37°C 温浴，直至结晶全部溶解。

1×洗液

吸取 $20\times$ 浓缩洗液 50 ml 至 1 L 的量筒，加蒸馏水至 1,000 ml，轻轻混匀，避免泡沫。转移至干净瓶内。 $2 - 8^{\circ}\text{C}$ 贮存， $1\times$ 洗液可稳定保存 30 天。

1×检测缓冲液

吸取 $10\times$ 浓缩检测缓冲液 10 ml 至 100 ml 量筒，加蒸馏水至 100 ml，轻轻混匀，避免泡沫。 $2 - 8^{\circ}\text{C}$ 贮存， $1\times$ 检测缓冲液可稳定保存 30 天。

检测抗体工作液

稀释前充分混匀。根据标准品和待检样本的数量，用 $1\times$ 检测缓冲液按 **1: 100** 稀释浓缩的检测抗体。

链霉亲和素工作液

稀释前充分混匀。根据标准品和待检样本的数量，用 $1\times$ 检测缓冲液按 **1: 100** 稀释浓缩的链霉亲和素。

注意：检测抗体工作液、链霉亲和素工作液均应在 30 分钟内使用。

样本稀释

为了保证实验成功，由于对样本的处理方式，培养条件等不同，建议首次使用本试剂盒前先进行一次预实验以摸索最佳的样本浓度，避免因浓度过高使显色反应超出酶标仪的检测上限或稀释倍数过大低于试剂盒灵敏度。对于样本的稀释，请1×检测缓冲液稀释血清/血浆样本，用细胞培养基稀释细胞培养上清。

标准曲线的制备

开盖前短暂离心，用蒸馏水重溶标准品，重溶体积标注于标准品的标签上。轻柔地涡旋震荡，确保充分混匀，重溶后标准品的浓度为40 ng/ml。重溶后静置10 - 30分钟。稀释前充分混匀。


请使用聚丙烯管进行标准品稀释。

血清/血浆样本标准曲线的制备：

取230 μl浓缩的标准品，加入230 μl 1×检测缓冲液，作为标准曲线的最高浓度（20 ng/ml）。在每一个试管中加入230 μl 1×检测缓冲液。使用高浓度标准品做1:1系列稀释。每次移液时，请确保充分混匀。以1×检测缓冲液作为标准曲线的零浓度。

细胞培养上清样本标准曲线的制备：

取230 μl浓缩的标准品，加入230 μl细胞培养基，作为标准曲线的最高浓度（20 ng/ml）。在每一个试管中加入230 μl细胞培养基。使用高浓度标准品做1:1系列稀释。每次移液时，确保充分混匀。以细胞培养基作为标准曲线的零浓度。

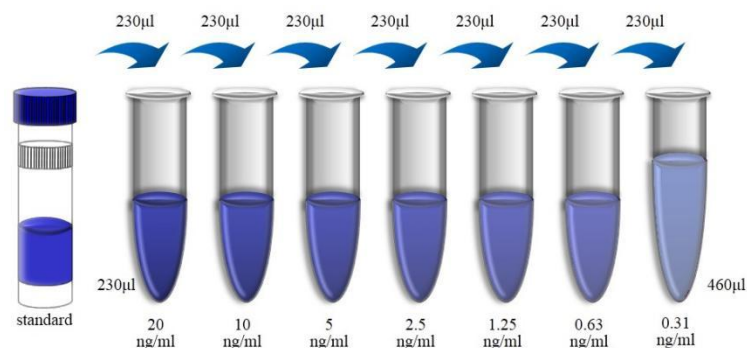

4. 检测步骤

检测之前请将所有的试剂、样本平衡至室温（25℃±3℃）。

- 1) 准备好所有需要的试剂及工作浓度标准品。
- 2) 将不需要的板条拆卸下来，放回装有干燥剂的铝箔袋，重新封好封口。
- 3) **浸泡酶标板：**加入300 μl 1×洗液静置浸泡30秒。为了获得理想的实验结果浸泡是必须的。弃掉洗液之后，在吸水纸上将微孔板拍干。洗板完成之后，请立即使用微孔板，不要让微孔板干燥。
- 4) **加标准品：**标准品孔加入100 μl 2倍倍比稀释的标准品。空白孔加入100 μl 1×检测缓冲液(血清/血浆样本)或培养基(细胞培养上清样本)。
- 5) **加样本：血清/血浆：**样本孔加入100 μl 预稀释样本。**细胞培养上清：**样本孔加入100 μl 细胞培养上清。(样本稀释请参考第6页“样本准备”)。
- 6) **加检测抗体：**每孔加入50 μl“检测抗体工作液”(参见试剂准备)。保证步骤4、5、6连续加样，不要间断。加样过程在15分钟内完成。
- 7) **孵育：**使用封板膜封板。100-300 转/分钟振荡（保证每孔溶液不撒出且能充分混匀即可），室温（25℃±3℃）孵育2小时。
- 8) **洗涤：**弃掉液体，每孔加入300 μl 洗液洗板，洗涤6次。每次洗板，在吸水纸上拍干。为获得理想的实验性能，必须彻底移除残留液体。
- 9) **加酶孵育：**每孔加入100 μl“链霉亲和素工作液”(参见试剂准备)。
- 10) **孵育：**使用新的封板膜封板。100-300 转/分钟振荡（保证每孔溶液不撒出且能充分混匀即可），室温（25℃±3℃）孵育45分钟。
- 11) **洗涤：**重复步骤8。

- 12) **加底物显色**: 每孔加入 100 μ l 显色底物, 避光, 室温 ($25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$) 孵育 5 - 30 分钟。
- 13) **加终止液**: 每孔加入 100 μ l 终止液。颜色由蓝色变为黄色。如果颜色呈现绿色或者颜色的变化明显不均匀, 请轻轻叩击板框, 充分混匀。
- 14) **检测读数**: 在 30 分钟之内, 使用酶标仪进行双波长检测, 测定 450 nm 最大吸收波长和 570 nm 或 630 nm 参考波长下的 OD 值。校准后的 OD 值为 450 nm 的测定值减去 570 nm 或 630 nm 的测定值。仅使用 450 nm 测定会导致 OD 值偏高, 并且准确度降低。

四、分析

1. 结果计算

计算标准品和样本的平均 OD 值, 然后减去零浓度标准品的 OD 值。


以标准品浓度为横坐标, OD 值为纵坐标, 用计算机软件进行回归拟合生成标准曲线。回归分析确定最佳拟合曲线。通过对浓度值和 OD 值取对数拟合, 可以对标准曲线进行线性化。此过程可能可以得到更多样本的浓度, 但数据的准确度会降低一些。

注意: 标准曲线最高浓度点的终浓度为 20 ng/ml。

如果血清/血浆样本按照说明书进行稀释, 最终的稀释倍数为 20。如果样本进行了其它方式的稀释, 计算样本浓度时请乘以相应的稀释倍数。

2. 典型数据

每次检测, 每块酶标板都必须设立标准曲线。下面的标准曲线仅作为示例参考。

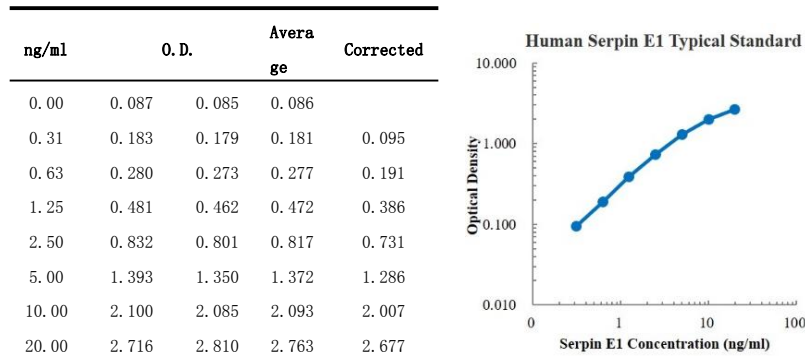

3. 灵敏度

人 Serpin E1 的最低可检测浓度为 1.53 pg/ml (6 次独立实验的平均值)。

10 个零标准品浓度 OD 的平均值加上两倍 SD, 计算最低可检测浓度。

4. 精密度

酶标板内精密度

3 个已知浓度的样本酶标板内重复测定 20 次, 评估酶标板内的精密度。

酶标板间精密度

3 个已知浓度的样本酶标板间重复检测 6 次, 评估酶标板间的精密度。

	酶标板内精密度			酶标板间精密度		
样本	1	2	3	1	2	3
	20	20	20	6	6	6
平均值 (pg/ml)	800.9	2283.9	7056.0	766.4	2209.6	6892.2
标准差	38.6	60.7	161.9	17.3	52.0	178.8
变异系数 (%)	4.8	2.7	2.3	2.3	2.4	2.6

5. 回收率

5 份健康人血清中加入 3 个不同浓度水平的人 Serpin E1，未加人 Serpin E1 的血清作为本底，计算回收率。回收率的范围从 80 %至 118 %，平均回收率为 90 %。

6. 稀释线性

5 份健康人血清中加入高浓度的人 Serpin E1，并在标准曲线的动力学范围内进行系列稀释，评估检测的线性。

	平均值 (%)	范围 (%)
1:2	95	83 - 105
1:4	113	99 - 125
1:8	102	87 - 116
1:16	92	81 - 103

7. 校准

本试剂盒的标准品为联科生物校准的高纯度重组人 Serpin E1。

8. 样本值

应用本试剂盒，检测 30 份健康志愿者的血清样本，志愿者的用药史不详。

样本类型	检测样本数量	浓度范围 (ng/ml)	可测百分率 (%)	可测样本平均浓度 (ng/ml)
血清	30	4.8 - 20.3	100	8.2


注意：此样本值范围非生理值范围。健康人样本的浓度范围因种属、样本制备以及检测人员、设备的不同而有所不同。以上数据仅供参考。

9. 特异性

本试剂盒识别天然和重组人 Serpin E1。下述因子进行了特异性的评估，没有观察到明显的交叉反应和干扰影响。

人		小鼠	大鼠
IFN- γ	Serpin B9	IFN- γ	IFN- γ
IL-1 β	Serpin C1	IL-1 β	IL-1 β
IL-2	Serpin D1	IL-2	IL-2
IL-4	Serpin E2	IL-4	IL-4
IL-6	Serpin F2	IL-6	IL-6
IL-10	Serpin G1	IL-10	IL-10
Serpin A1	Serpin I1	IL-17A	IL-17A
Serpin A3	Serpin I2	Serpin E1	TNF- α
Serpin A4	tPA	TNF- α	
Serpin A5	uPA	Vitronectin	
Serpin B6	uPAR		
Serpin B8	Vitronectin		

10. 排板布局

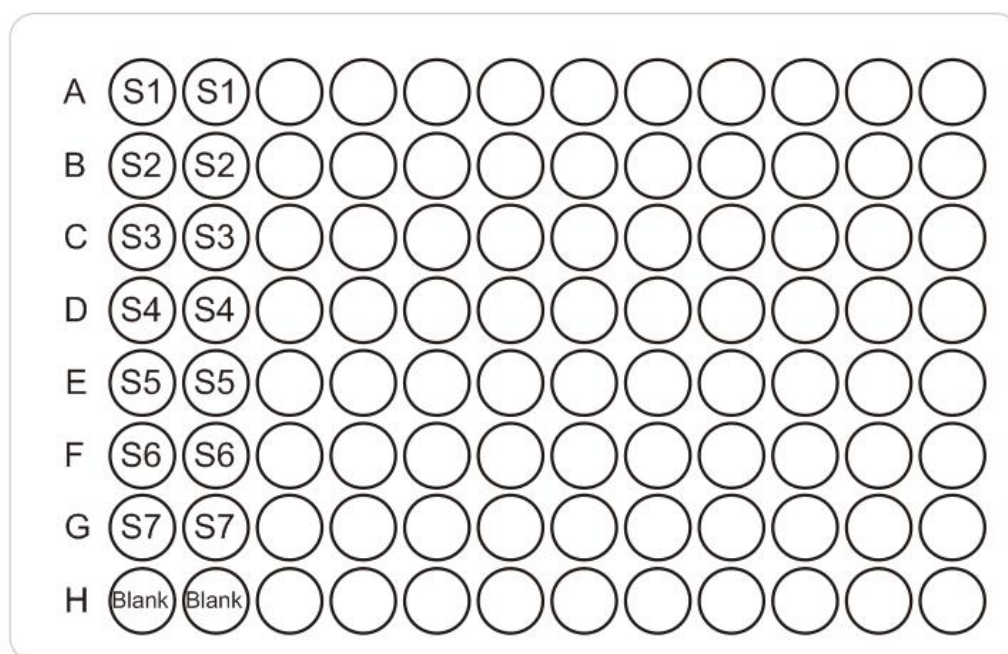

更多资讯和支持请关注联科生物公众号

